


# CATALOGO PRODOTTI

**Linea Ovesco 2026**

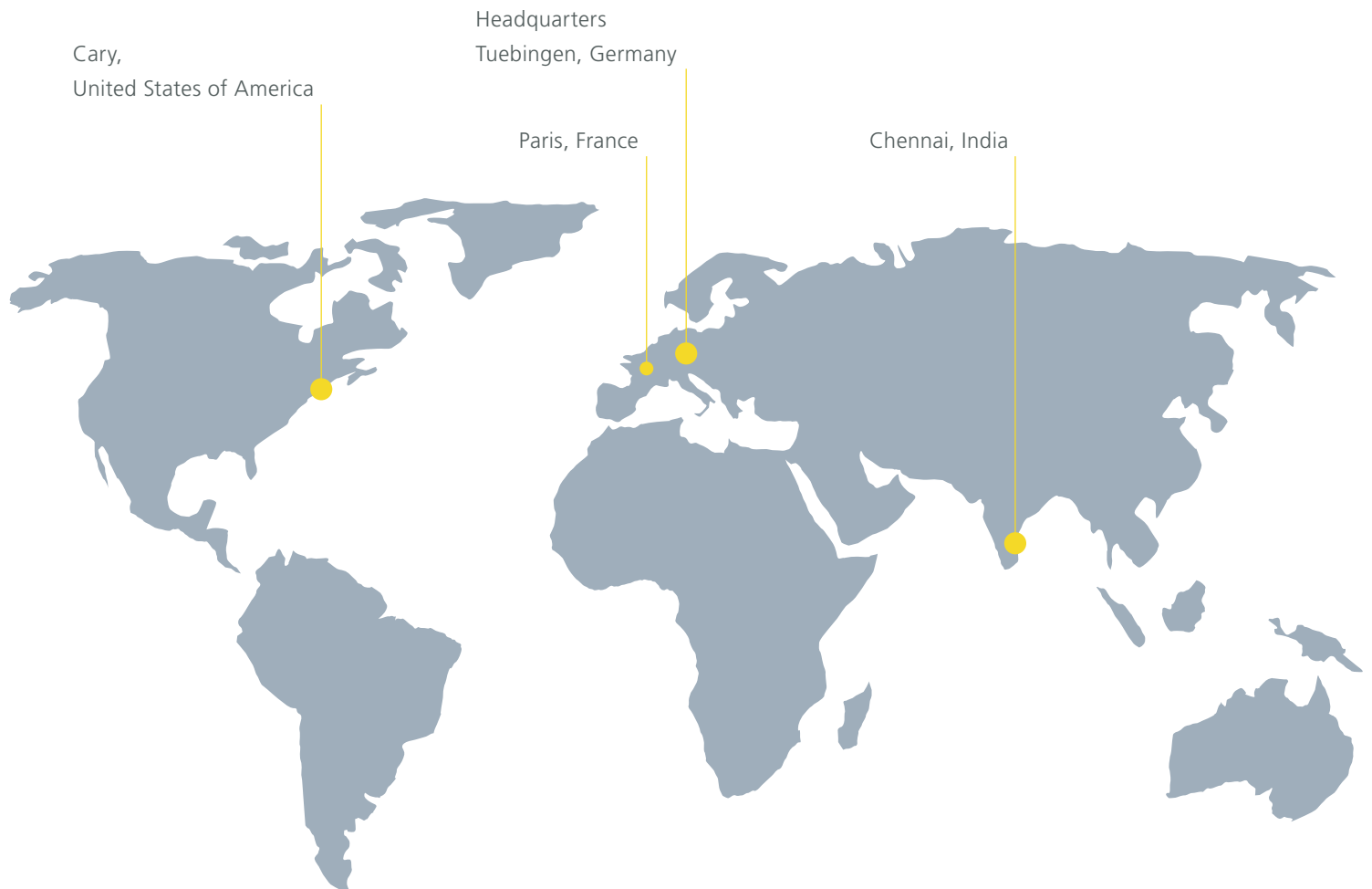

## Ovesco Endoscopy AG

Ovesco Endoscopy AG è un'azienda produttrice di dispositivi medici specializzata nei settori dell'endoscopia flessibile, della chirurgia endoluminale e della diagnostica telemetrica. L'azienda sviluppa, produce e commercializza prodotti innovativi per la diagnosi e il trattamento delle malattie gastrointestinali.

**I prodotti Ovesco sono sinonimo di efficacia ed efficienza d'uso.**

## Contenuti

OTSC<sup>®</sup>neo System

stentFIX System

FTRD<sup>®</sup> System

BARS<sup>®</sup>

remOVE System

ScopeCaps

RESECT+

HemoPill<sup>®</sup>

OTSC<sup>®</sup> Proctology





# OTSC®neo System

*saving lives*

OTSC®neo: come migliorare un grande dispositivo

**OTSC®neo** è il passo successivo nello sviluppo di OTSC®: un innovativo sistema di clip per il trattamento endoscopico delle emorragie gastrointestinali e per la chiusura delle lesioni acute e croniche della parete.



# OTSC®neo System

## Indicazioni

- Emostasi
- Chiusura perforazioni
- Chiusura fistole
- Compressione preventiva dei tessuti dopo ablazione

## Vantaggi

- Compressione dinamica e adattamento continuo allo spessore del tessuto
- Maggior volume di tessuto catturato
- Protezione del tessuto compresso
- Forza di compressione elevata sulla lesione
- Facile maneggevolezza e applicazione
- Conferma visiva della posizione della clip grazie al nuovo anello blu durante l'applicazione

## Info Prodotto



### OTSC®neo System

Il cappuccio con clip premontata viene posizionato sulla punta dell'endoscopio e collegato al manipolo tramite il filo attraverso il canale di lavoro. Girando il manipolo si tenderà il filo e la clip sarà rilasciata.



### OTSC® Anchor

L'ancora OTSC® migliora la mobilizzazione dei tessuti anche in condizioni difficili come su tessuti inspessiti (ad esempio, fistole, basi ulcerose).



### OTSC® Twin Grasper®

L'OTSC® Twin Grasper® facilita l'approssimazione dei margini della ferita di una lesione.

Le due parti del grasper possono essere aperte indipendentemente, permettendo di afferrare e mobilizzare margini opposti delle lesioni nel cappuccio OTSC® per la chiusura della perforazione.



### Design OTSC®neo clip

Le varianti sono disponibili in due diverse profondità di cappuccio (3mm e 6mm) per contenere quantità più piccole o maggiori di tessuto, tre diverse dimensioni di cappuccio (11, 12 e 14) e tre forme di denti differenti (a, t, gc) per aree di applicazione differenti.

# Codici & Misure

|  OTSC <sup>®</sup> neo SYSTEM | Diametro Endoscopio Ø [mm] | Max.diametro Esterno Ø [mm] | Profondità cappuccio [mm] | Clip Design | Lunghezza filo [cm] | Variante | Pz. / Conf | Codice  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------|------------|---------|
| OTSC <sup>®</sup> neo System Set mini                                                                          | 8.5–10                     | 14.6                        | 6                         | a           | 165                 | mini/6 a | 1          | 100.01n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 165                 | mini/6 t | 1          | 100.02n |
| OTSC <sup>®</sup> neo System Set 11                                                                            | 8.5–11                     | 16.0                        | 3                         | a           | 165                 | 11/3 a   | 1          | 100.03n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 165                 | 11/3 t   | 1          | 100.04n |
|                                                                                                                |                            |                             | 6                         | a           | 165                 | 11/6 a   | 1          | 100.09n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 165                 | 11/6 t   | 1          | 100.10n |
| OTSC <sup>®</sup> neo System Set 12                                                                            | 10.5–12                    | 17.4                        | 3                         | a           | 165                 | 12/3 a   | 1          | 100.05n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           |             | 220                 | 12/3 a   | 1          | 100.28n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 165                 | 12/3 t   | 1          | 100.06n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           |             | 220                 | 12/3 t   | 1          | 100.29n |
|                                                                                                                |                            |                             | 6                         | a           | 165                 | 12/6 a   | 1          | 100.11n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           |             | 220                 | 12/6 a   | 1          | 100.30n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 165                 | 12/6 t   | 1          | 100.12n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           |             | 220                 | 12/6 t   | 1          | 100.31n |
| OTSC <sup>®</sup> neo System Set 14                                                                            | 11.5–14                    | 20.1                        | 3                         | a           | 220                 | 14/3 a   | 1          | 100.07n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 220                 | 14/3 t   | 1          | 100.08n |
|                                                                                                                |                            |                             | 6                         | a           | 220                 | 14/6 a   | 1          | 100.13n |
|                                                                                                                |                            |                             |                           | t           | 220                 | 14/6 t   | 1          | 100.14n |

|                                                                                                                                 | Prodotto                                             | Descrizione                                                                         | Pz. / Conf | Codice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  OTSC <sup>®</sup> ANCHOR                    | OTSC <sup>®</sup> Anchor (165 cm)                    | Larghezza ancora: 12 mm<br>Profondità ancora: 4 mm<br>Lunghezza stelo: 165 cm       | 1          | 200.10 |
|                                                                                                                                 | OTSC <sup>®</sup> Anchor 220tt (220 cm)              | Larghezza ancora: 9 mm<br>Profondità ancora : 2 – 2.5 mm<br>Lunghezza stelo: 220 cm | 1          | 200.11 |
|  OTSC <sup>®</sup> TWIN GRASPER <sup>®</sup> | OTSC <sup>®</sup> Twin Grasper <sup>®</sup> (165 cm) | Lunghezza operativa: 165 cm                                                         | 1          | 200.44 |
|                                                                                                                                 | OTSC <sup>®</sup> Twin Grasper <sup>®</sup> (220 cm) | Lunghezza operativa: 220 cm                                                         | 1          | 200.45 |

| Clip Design                                                                                      | Descrizione                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clip tipo a   | Denti smussi, principalmente effetto compressivo                 |
| Clip tipo t   | Denti mediamente appuntiti, effetto di compressione e ancoraggio |
| Clip tipo gc  | Denti appuntiti per la chiusura della parete gastrica            |

Nota: le clip Ovesco possono essere rimosse con il sistema **remOVE** se necessario.

guarda il video per assemblare OTSC<sup>®</sup>neo System





# stentFIX System

Soluzione innovativa per il fissaggio di stent metallici nel tratto digestivo

Il design anatomico della clip **stentFIX** permette il posizionamento in modo facile e ottimale sul margine dello stent per il fissaggio nel tratto gastrointestinale.



# stentFIX System

## Indicazioni

- Fissaggio stent prossimale
- Fissaggio stent distale

## Vantaggi

- Clip in "Nitinol®", lega super-elastica a memoria di forma
- Forza costante di compressione esercitata dalla clip
- Mantiene lo stent nella posizione desiderata
- Biocompatibile, sicuro per la risonanza magnetica e può rimanere anche a lungo termine nel corpo

## Info Prodotto



### stentFIX System

La clip stentfix OTSC® è ancorata al tessuto e alla maglia dello stent, fissandolo al tessuto e impedendo la migrazione dello stent..


## Codici & Misure

|                                                                                                     | Prodotto                     | Descrizione                                                                                                                                                                         | Pz. / Conf | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  STENTFIX SYSTEM | stentFIX System Set (165 cm) | Lunghezza filo: 165 cm<br>Diametro compatibile dell'endoscopio: Ø 8.5 – 11 mm<br>Profondità Cap : 7 mm<br>Clip appositamente adattata con denti appuntiti per l'adattamento al lume | 1          | 100.50n |

Nota: le clip Ovesco possono essere rimosse con il sistema **remOVE** se necessario.

guarda il video per la fissazione dello stent



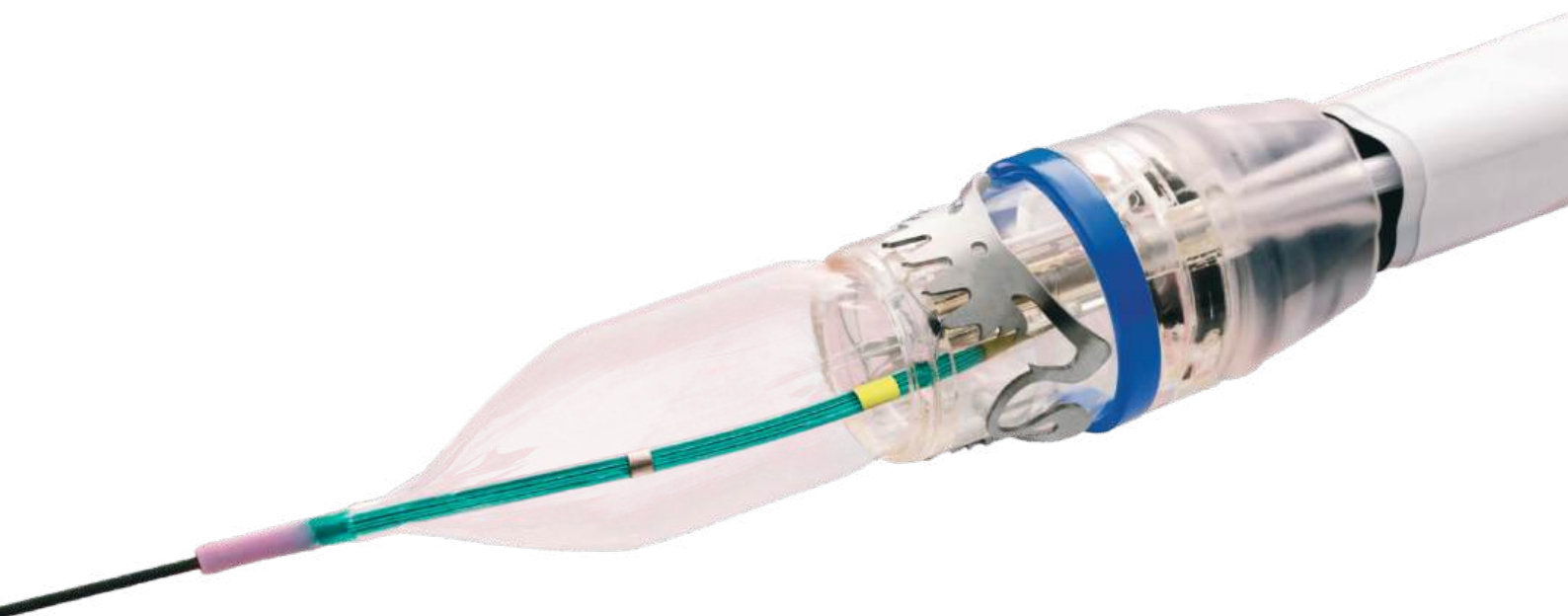

# FTRD<sup>®</sup> System

Il sistema FTRD<sup>®</sup> consente la resezione endoscopica a tutto spessore delle lesioni nel tratto gastrointestinale.

**FTRD<sup>®</sup> System** è un dispositivo utilizzato in endoscopia flessibile per la resezione a tutto spessore e il campionamento diagnostico di tessuti tramite resezione di lesioni adeguate nel tratto digestivo.



# FTRD® System

## Indicazioni

- Resezione endoscopica a tutto spessore nel colon e nel retto (colonic FTRD®), stomaco e duodeno (gastroduodenal FTRD®) e biopsia a tutto spessore a fine diagnostico (diagnostic FTRD®)
- Adenomi Non-lifting (recidive)
- Adenomi diverticolari
- Piccoli tumori subepiteliali
- Early carcinoma
- Adenoma in sede appendicolare
- Aganglioni intestinali congeniti (e.g. Morbo di Hirschsprung)
- Neuropatie e Miopatie enterali
- Amiloidosi gastrointestinale
- Manifestazioni enterali di patologie neurologiche (Morbo di Parkinson)

## Vantaggi

- Tecnica transluminale e mini-invasiva
- La resezione della parete dell'organo avviene solo dopo che il sito bersaglio è stato chiuso in modo sicuro utilizzando la comprovata tecnologia OTSC®
- Ottima valutazione istologica della resezione a tutto spessore
- Ampia gamma di applicazioni

## Info Prodotto



### colonic FTRD® // diagnostic FTRD®

Strumento per endoscopia flessibile per la resezione a tutto spessore e il prelievo diagnostico di tessuto tramite resezione delle lesioni appropriate nel colon e nel retto.



### gastroduodenal FTRD®

Sistema FTRD® con un diametro esterno del cappuccio ridotto per la resezione endoscopica a tutto spessore (soprattutto nello stomaco) e acquisizione diagnostica di tessuto in stomaco e nel duodeno.



### FTRD® Marking Probe

Sonda di coagulazione HF per la marcatura della lesione bersaglio in preparazione all'uso del Sistema FTRD®. La marcatura della lesione faciliterà sia la rilevazione che la completa resezione del tessuto bersaglio.



### FTRD® Grasper

Pinza Grasper dedicata per afferrare e mobilizzare il tessuto bersaglio nel cappuccio FTRD®. Il Grasper FTRD® è anche disponibile separatamente.

## Info Prodotto




### **FTRD® prOVE Cap**

Cappuccio di prova che corrisponde alle dimensioni del rispettivo set FTRD® (colonic o gastroduodenal) per verificare in anticipo l'applicabilità del Set FTRD®. FTRD® prOVE Cap non è incluso nel rispettivo set.



### **OTSC® Anchor 220tt**

Per una migliore mobilizzazione del tessuto nella parte sottomucosa (soprattutto nello stomaco), l'OTSC® Anchor 220tt può offrire un'alternativa (non inclusa nel kit FTRD).

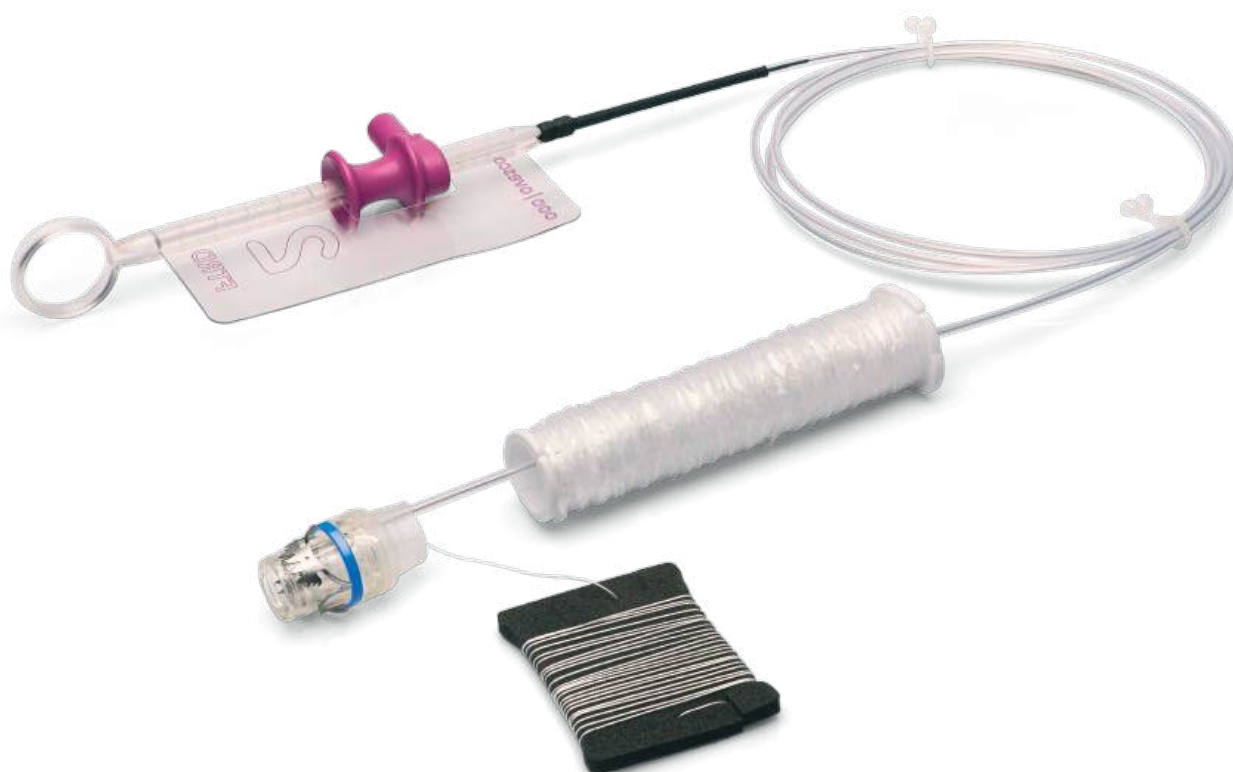

# Codici & Misure

|                                                                                                             | Prodotto                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Pz. / Conf | Codice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  FTRD®<br>COLONIC          | <b>colonic FTRD® Set</b>              | Sistema per resezione a tutto spessore nel colon e nel retto<br>Per endoscopi con diametro di Ø 11,5 – 13,2 mm<br>Lunghezza del filo: 220 cm; Lunghezza dell'ansa: 180 cm                                                                                      | 1          | 200.70 |
|                                                                                                             | include:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|  FTRD®<br>MARKING PROBE    | FTRD® Marking Probe                   | Lunghezza: 220 cm<br>Per diametro del canale di lavoro di almeno 2,8 mm                                                                                                                                                                                        |            |        |
|  FTRD®<br>GRASPER          | FTRD® Grasper                         | Lunghezza: 220 cm<br>diametro del canale di lavoro di almeno 3,2 mm con FTRD®                                                                                                                                                                                  |            |        |
|  FTRD®<br>prOVE CAP        | <b>colonic FTRD® prOVE cap</b>        | Cap di prova per colonic FTRD® per determinare l'idoneità all'uso del sistema (accessibilità e mobilitazione della lesione)                                                                                                                                    | 2          | 200.71 |
|  FTRD®<br>DIAGNOSTIC       | <b>diagnostic FTRD® Set</b>           | Sistema per resezione a tutto spessore per uso diagnostico nel colon e nel retto<br>Per endoscopi con diametro di: 10,5 – 12,0 mm<br>Lunghezza del filo: 220 cm; Lunghezza dell'ansa: 180 cm                                                                   | 1          | 200.76 |
|                                                                                                             | include:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|  FTRD®<br>MARKING PROBE    | FTRD® Marking Probe                   | Lunghezza: 220 cm<br>Per diametro del canale di lavoro di almeno 2,8 mm                                                                                                                                                                                        |            |        |
|  FTRD®<br>GRASPER         | FTRD® Grasper                         | Lunghezza: 220 cm<br>diametro del canale di lavoro di almeno 3,2 mm con FTRD®                                                                                                                                                                                  |            |        |
|  FTRD®<br>GASTRODUODENAL | <b>gastroduodenal FTRD® Set</b>       | Sistema per la resezione a tutto spessore nello stomaco e duodeno<br>Per gastroscopi (lunghezza massima di inserzione 110 cm) con un diametro di 10,5 – 12,0 mm e canale di lavoro di almeno 3,7 mm<br>Lunghezza del filo: 220 cm; Lunghezza dell'ansa: 140 cm | 1          | 200.72 |
|                                                                                                             | include:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
|  FTRD®<br>MARKING PROBE  | FTRD® Marking Probe                   | Lunghezza: 220 cm<br>Per strumenti con diametro del canale di lavoro di almeno 2,8 mm                                                                                                                                                                          |            |        |
|  FTRD®<br>GRASPER        | FTRD® Grasper                         | Lunghezza: 220 cm<br>Per strumenti con diametro del canale di lavoro di almeno 3,2 mm                                                                                                                                                                          |            |        |
|                                                                                                             | Pallone di inserimento/dilatazione    | Lunghezza: 180 cm<br>Lunghezza del palloncino: 60 mm, diametro del palloncino: 20 mm<br>Per strumenti con un diametro del canale di lavoro di almeno 3,7 mm                                                                                                    |            |        |
|                                                                                                             | Filo Guida                            | Spessore: Ø 0,89 mm / 0,035"<br>Lunghezza: 370 cm                                                                                                                                                                                                              |            |        |
|  FTRD®<br>prOVE CAP      | <b>gastroduodenal FTRD® prOVE Cap</b> | Cap di prova FTRD® per verificare l'idoneità della FTRD® gastroduodenale e diagnostica (accessibilità e mobilitazione della lesione)                                                                                                                           | 2          | 200.77 |
|  OTSC®<br>ANCHOR         | <b>OTSC® Anchor 220tt (220 cm)</b>    | Larghezza ancora: 9 mm<br>Profondità ancora: 2 – 2,5 mm<br>Lunghezza di lavoro: 220 cm                                                                                                                                                                         | 1          | 200.11 |
|  FTRD®<br>GRASPER        | <b>FTRD® Grasper</b>                  | Lunghezza di lavoro: 220 cm<br>diametro del canale di lavoro di almeno 3,2 mm con FTRD®                                                                                                                                                                        | 5          | 200.73 |

Nota: Le clip di Ovesco possono essere rimosse con il sistema **remOVE** se necessario.

guarda il video per assemblare FTRD® System





# BARS<sup>®</sup>

Trattamento endoscopico per la riduzione del lume nelle anastomosi

**BARS<sup>®</sup>** è basato sul sistema OTSC<sup>®</sup> ed è stato sviluppato appositamente per la revisione endoscopica del bypass gastrico, che possono verificarsi dopo RYGB [Roux-en-Y Gastric Bypass].



## Indicazioni

- Riduzione del lume
- Trattamento dell'anastomosi (ad esempio, possono verificarsi anastomosi ingrossate dopo precedenti procedure bariatriche come RYGB)

## Vantaggi

- BARS® consente l'uso simultaneo di tre diversi ausili applicativi con endoscopi convenzionali a canale singolo. Questo consente una retrazione uniforme dei tessuti e garantisce un risultato definito
- Tecnica transluminale e mini-invasiva
- Compressione dinamica con adattamento continuo allo spessore del tessuto

## Info Prodotto



### BARS® Set

Il BARS® Set consiste in un cappuccio applicativo con clip premontata, passa-fili e manipolo BARS®, oltre a due ancore BARS®, un palloncino di inserimento con filo guida e un palloncino per la calibrazione del lume interno.



### BARS® Anchor black & silver

Accessori per la mobilizzazione e l'approssimazione delle estremità tissutali opposte dell'anastomosi nel cappuccio di applicazione BARS®.



### Pallone di inserimento e filo guida

Il pallone di inserimento aiuta a garantire l'accesso sicuro del sistema BARS®, specialmente quando si attraversa lo sfintere esofageo superiore.



### Pallone di calibrazione

Il Pallone di calibrazione definisce il diametro del lume interno residuo desiderato (6mm). Allo stesso tempo, previene una riduzione eccessiva del lume durante l'applicazione della clip.

# Codici & Misure

|                                                                                                | Prodotto                | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Pz. / Conf | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  BARS®<br>SET | BARS® Set               | Cappuccio BARS® con clip BARS® premontata, manipolo e passa-fili<br>Per gastroscopi (lunghezza massima di inserzione 110 cm) con diametro Ø 10,0 – 12,0 mm e canale di lavoro di almeno 3,7 mm, lunghezza filo 165 cm | 1          | 100.60 |
|                                                                                                | include:                |                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
|                                                                                                | BARS® Anchor silver     | Larghezza ancora: 9 mm;<br>Profondità ancora: 2 – 2,5 mm; Lunghezza operativa: 165 cm                                                                                                                                 |            |        |
|                                                                                                | BARS® Anchor black      | Larghezza ancora: 9 mm;<br>Profondità ancora: 2 – 2,5 mm; Lunghezza operativa: 165 cm                                                                                                                                 |            |        |
|                                                                                                | Pallone di inserimento  | Lunghezza: 180 cm; Lunghezza del palloncino: 60 mm; Diametro del palloncino: 20 mm                                                                                                                                    |            |        |
|                                                                                                | Pallone di calibrazione | Lunghezza: 185 cm; Lunghezza del palloncino: 40 mm; Diametro del palloncino: 6 mm                                                                                                                                     |            |        |
|                                                                                                | Filo guida              | Spessore: Ø 0,76 mm/0,03"; Lunghezza: 370 cm                                                                                                                                                                          |            |        |

Nota: le clip Ovesco possono essere rimosse con il sistema **remOVE** se necessario.

guarda il video per assemblare BARS®





# remOVE System

Il sistema remOVE viene utilizzato per la rimozione endoscopica delle clip Ovesco nel tratto gastrointestinale.

**RemOVE System** è appositamente progettato per soddisfare i requisiti di rimozione delle clip. Con il sistema remOVE, le clip Ovesco possono essere rimosse in modo efficace, minimamente invasivo e sicuro.



# remOVE System

## Indicazioni

- Posizionamento errato della clip
- Fissaggio accidentale di uno strumento al tessuto
- Complicanze locali date dalla clip (ostruzione del lume)
- Necessità di una biopsia ripetuta o di una successiva resezione sul sito della lesione

## Vantaggi

- Efficace e sicura frammentazione ed estrazione delle clip Ovesco
- Sicuro e facile da utilizzare
- Minima dispersione termica sul tessuto
- Recupero in sicurezza dei frammenti di clip

## Info Prodotto



### remOVE DC Impulse

Il remOVE DC Impulse è un dispositivo elettromedicale destinato alla frammentazione delle clip di Ovesco nel tratto gastrointestinale. Il sistema remOVE DC Impulse è progettato per garantire che l'erogazione dell'energia avvenga solo quando si stabilisce un contatto sufficiente con un segmento della clip. Questo è indicato tramite un segnale acustico continuo.



### remOVE DC Cutter

Strumento endoscopico bipolare per la frammentazione delle clip di Ovesco nel tratto gastrointestinale.



### remOVE SecureCap


Cappuccio elastico e trasparente per l'estrazione sicura dei frammenti di clip.

## Info Prodotto



### **remOVE Grasper**

Il remOVE Grasper è una pinza da presa usata per afferrare e recuperare corpi estranei o frammenti di clip nel tratto gastrointestinale.

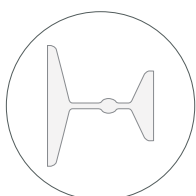

### **remOVE Shield**

Il remOVE Shield è una pellicola adesiva che protegge la lente ottica di un endoscopio flessibile dalle eventuali scintille durante l'utilizzo del sistema remOVE.

# Codici & Misure

|                                                                                                        | Prodotto                 | Descrizione                                                                               | Pz. / Conf. | Codice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  remOVE<br>DC IMPULSE | <b>remOVE DC Impulse</b> | Componenti: DC Impulse; pedaliera, cavo DC per collegare DC cutter, cavo di alimentazione | 1           | 400.01 |

|                                                                                                       |                                |                                                                                          |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|  remOVE<br>DC CUTTER | <b>remOVE DC Cutter Set 12</b> | Sonda flessibile, lunghezza: 220 cm, Adatto per endoscopi con canale di lavoro di 2,8 mm | 1 | 400.02.01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

include:

|                                                                                                       |                  |                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  remOVE<br>SECURECAP | remOVE SecureCap | Cappuccio elastico da 12 (per endoscopi con diametro di: Ø 9,5 – 12 mm)                                                                   | 1 |
|  remOVE<br>GRASPER   | remOVE Grasper   | Pinza da presa per recuperare frammenti di clip, stelo flessibile, lunghezza: 220 cm, adatto per endoscopi con canale di lavoro di 2,8 mm | 1 |
|  remOVE<br>SHIELD    | remOVE Shield    | Film adesivo per proteggere la lente ottica dell'endoscopio flessibile dalle scintille volanti durante l'uso del sistema remOVE.          | 2 |

|                                                                                                       |                                |                                                                                          |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|  remOVE<br>DC CUTTER | <b>remOVE DC Cutter Set 14</b> | Sonda flessibile, lunghezza: 220 cm, Adatto per endoscopi con canale di lavoro di 2,8 mm | 1 | 400.02.02 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

include:

|                                                                                                        |                  |                                                                                                                                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  remOVE<br>SECURECAP | remOVE SecureCap | Cappuccio elastico da 14 (per endoscopi con diametro di: Ø 12 – 14 mm)                                                                    | 1 |
|  remOVE<br>GRASPER  | remOVE Grasper   | Pinza da presa per recuperare frammenti di clip, stelo flessibile, lunghezza: 220 cm, adatto per endoscopi con canale di lavoro di 2,8 mm | 1 |
|  remOVE<br>SHIELD   | remOVE Shield    | Film adesivo per proteggere la lente ottica dell'endoscopio flessibile dalle scintille volanti durante l'uso del sistema remOVE.          | 2 |

guarda il video di rimozione clip con remOVE





# ScopeCaps

Cappucci distali per diverse esigenze endoscopiche

**ScopeCaps** sono una linea di innovativi cappucci endoscopici progettati per una vasta gamma di applicazioni..



# BougieCap

## Indicazioni

- Dilatazione di stenosi nel tratto gastrointestinale superiore

## Vantaggi

- Dilatazione progressiva sotto visione
- Dilatazione delicata e precisa a incrementi millimetrici grazie a un doppio plateau del cappuccio
- Insufflazione dell'aria, aspirazione e irrigazione possibili anche con il cappuccio montato
- Progettazione che risparmia risorse: fino al 99% in meno di rifiuti rispetto ai dispositivi di dilatazione convenzionali

## Info Prodotto



### BougieCap

Cappuccio endoscopico per la dilatazione di stenosi nel tratto gastrointestinale superiore sotto controllo visivo.

## Codici & Misure

|                                                                                                | Prodotto               | Descrizione                                                                          | Pz. / Conf. | Codici    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  BOUGIE CAP | <b>BougieCap 7/8</b>   | Diametro esterno/dilatazione: Ø 7/8 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 5,4 – 5,9 mm   | 3           | 400.31.02 |
|                                                                                                | <b>BougieCap 9/10</b>  | Diametro esterno/dilatazione: Ø 9/10 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 5,4 – 5,9 mm  | 3           | 400.31.03 |
|                                                                                                | <b>BougieCap 11/12</b> | Diametro esterno/dilatazione: Ø 11/12 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 9,4 – 9,9 mm | 3           | 400.32.01 |
|                                                                                                | <b>BougieCap 13/14</b> | Diametro esterno/dilatazione: Ø 13/14 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 9,4 – 9,9 mm | 3           | 400.32.02 |
|                                                                                                | <b>BougieCap 15/16</b> | Diametro esterno/dilatazione: Ø 15/16 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 9,4 – 9,9 mm | 3           | 400.32.03 |
|                                                                                                | <b>BougieCap 17/18</b> | Diametro esterno/dilatazione: Ø 17/18 mm<br>Diametro dell'endoscopio: Ø 9,4 – 9,9 mm | 3           | 400.32.04 |

Ulteriori informazioni sui prodotti sul sito web



# OTSG Xcavator®

## Indicazioni

- Rimozione dei corpi estranei
- Rimozione boli alimentari
- Rimozione coaguli di sangue
- Rimozione di tessuto necrotico (pancreatico)

## Vantaggi

- Capacità extra-grande e alta forza di presa
- Il design conico e le punte smussate proteggono il tessuto
- Il canale di lavoro rimane libero per strumenti aggiuntivi o per aspirazione e irrigazione

## Info Prodotto



### OTSG Xcavator®

Pinza da presa over the scope con capacità extra-grande per la rimozione facile ed efficace di tessuto necrotico e corpi estranei come boli alimentari.

## Codici & Misure

|                                                                                                       | Prodotto       | Descrizione                                                                                                                       | Pz. / Conf. | Codice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  OTSG<br>XCAVATOR® | OTSG Xcavator® | Per endoscopi con diametro esterno di 9,5 – 10,5 mm<br>Lunghezza stelo : 165 cm<br>Include guaina per endoscopio e nastro adesivo | 2           | 200.15 |

guarda il video per assemblare OTSG Xcavator®



# FBR Set

## Indicazioni

- Rimozione corpi estranei

## Vantaggi

- Il cappuccio lungo ed elastico protegge i tessuti durante l'estrazione
- Ottima capacità di presa grazie al design combinato del grasper
- Rimozione in sicurezza di corpi estranei e oggetti contundenti

## Info Prodotto



### FBR Set

Cappuccio elastico e pinza da presa per rimuovere corpi estranei dal tratto gastrointestinale.

## Codici & Misure

|                                                                                             | Prodotto         | Descrizione                                                                                                                  | Pz. / Conf. | Codice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  FBR SET | <b>FBR Set</b>   | Per endoscopi con diametro Ø 9,5 – 12 mm                                                                                     | 2           | 400.05 |
|                                                                                             | include:         |                                                                                                                              |             |        |
|                                                                                             | remOVE SecureCap | Cappuccio elastico da 12 (per endoscopi con diametro di: Ø 9,5 – 12 mm)                                                      |             |        |
|                                                                                             | remOVE Grasper   | Pinze da presa dentata per recuperare frammenti di clip, stelo flessibile, lunghezza: 220 cm, per canale di lavoro di 2,8 mm |             |        |

Ulteriori informazioni sui prodotti sul sito web



## Indicazioni

- Facilita la coagulazione con argon plasma (APC)
- APC viene utilizzato, ad esempio, nei casi di mucosa gastrica ectopica, esofago di Barrett, angiodisplasia, sindrome GAVE e proctiti per radiazioni.

## Vantaggi

- Facilita un trattamento APC preciso e omogeneo nel tratto gastrointestinale.
- Sonda angolata per una migliore manipolazione e accessibilità dei tessuti.
- Distanza costante della sonda grazie alla fissazione sicura.
- Argocap protegge la sonda dal contatto con i tessuti e riduce il rischio di adesione.
- Il canale di lavoro rimane libero per l'uso con strumenti aggiuntivi.

## Info Prodotto



### ArgoCap®

Cappuccio di protezione per una coagulazione sicura e il fissaggio della sonda APC durante la coagulazione argon plasma per un trattamento focalizzato sotto controllo visivo diretto.

## Codici & Misure

|                                                                                     | Prodotto | Descrizione                                                                                                           | Pz. / Conf. | Codice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | ArgoCap® | Per endoscopi con diametro esterno di 9,2 – 10,5 mm<br>Compatibili con sonde APC di diametro 2,3 mm ad uscita assiale | 3           | 200.52 |





# RESECT+

*next level resection*

Tecniche di resezione endoscopica ottimizzate

**RESECT+** è una serie di accessori composta da strumenti ottimizzati per ESD, EMR e altre tecniche di resezione endoscopica.



## Indicazioni

- EMR / EMR+
- ESD / ESD+
- Hybrid-ESD/Hybrid-ESD+
- Emostasi
- POEM
- Rimozione Clip

## Vantaggi

- Riduzione del tempo procedurale grazie a meno cambi di strumento.
- EMR ed ESD facili e veloci.
- Resezione en bloc.
- Operatività migliorata.
- Soluzione a lunga durata riduce la necessità di riiniezione.

## Info Prodotto



### **AWC®duo**


Canale di lavoro aggiuntivo combinato con un cappuccio distanziatore per endoscopi flessibili che consente l'introduzione di strumenti aggiuntivi o aspirazione e irrigazione.



### **Coag Dissector**

Strumento smusso per la dissezione dei tessuti e per il trattamento dell'emorragia, ad esempio durante la resezione.

## Info Prodotto

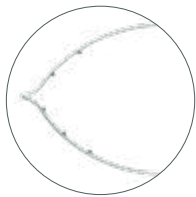

### **Traction Polypectomy Snare**

Ansa dentata per una migliore acquisizione endoscopica di tessuto durante la resezione.



### **LiftUp®**

Soluzione per tecniche di resezione endoscopica come ESD, EMR e POEM.

Si gelifica termoreversibilmente a temperatura corporea e forma un cuscinetto stabile nella sottomucosa.



### **AqaNife®**

Strumento elettrochirurgico monopolare per la marcatura, l'incisione e la dissezione dei tessuti.

Può essere utilizzato anche per iniettare soluzioni.

# Codici & Misure

|                                                                                                                       | Prodotto                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Pz. / Conf. | Codice    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  <b>RESECT+</b><br><b>AWC°duo</b>    | <b>AWC° duo</b><br><b>Additional Working Channel (124 cm)</b> | Per endoscopi con lunghezza operativa di 103 – 110 cm<br>Per endoscopi di diametro 9,8 – 11,5 mm                                                                                                                      | 2           | 200.57.05 |
|                                                                                                                       | <b>AWC° duo</b><br><b>Additional Working Channel (184 cm)</b> | Per endoscopi con lunghezza operativa di 160 – 170 cm<br>Per endoscopi di diametro 11,5 – 13,5 mm                                                                                                                     | 2           | 200.57.06 |
|  <b>RESECT+</b><br><b>LIFTUP°</b>    | <b>LiftUp° Kit</b>                                            | Il kit contiene:<br>1 pacchetto LiftUp° {200.56.01}<br>10 siringhe Luer lock<br>5 aghi di iniezione                                                                                                                   | 1           | 200.56.02 |
|                                                                                                                       | <b>LiftUp°</b>                                                | Agente da iniezione termo-reversibile per resezione endoscopica.<br>Fiala da 20 ml                                                                                                                                    | 5           | 200.56.01 |
|                                                                                                                       | <b>Luer Lock Syringe</b>                                      | Siringa Luer Lock da 3 ml per l'applicazione del LiftUp°                                                                                                                                                              | 50          | 200.59    |
|  <b>COAG</b><br><b>DISSECTOR</b>   | <b>Coag Dissector</b>                                         | Strumento HF monopolare<br>Può essere utilizzato con canali di lavoro con diametro da 2,8 mm.<br>Lunghezza: 165 cm.                                                                                                   | 1           | 200.50    |
|  <b>RESECT+</b><br><b>AqANIFE°</b> | <b>AqaNife°</b>                                               | Lunghezza dell'ago: 1,5 mm; funzione di irrigazione per l'irrigazione dell'area di dissecazione; reiniezione senza cambiare strumento;<br>Per diametri con canale di lavoro di almeno 2,8 mm, lunghezza stelo: 220 cm | 1           | 200.53.01 |
|                                                                                                                       | <b>AqaNife°</b>                                               | Lunghezza dell'ago: 2,5 mm; funzione di irrigazione per l'irrigazione dell'area di dissecazione; reiniezione senza cambiare strumento;<br>Per diametri di canale di lavoro di almeno 2,8 mm, lunghezza stelo: 220 cm  | 1           | 200.53.03 |
|  <b>TRACTION</b><br><b>SNARE</b>   | <b>Traction Polypectomy Snare</b>                             | Ansa polifilamento dentata per la resezione endoscopica dei tessuti<br>Diametro: 25 mm, Lunghezza: 220 cm                                                                                                             | 10          | 200.55.10 |
|  <b>OTSC°</b><br><b>ANCHOR</b>     | <b>OTSC° Anchor (165 cm)</b>                                  | Larghezza ancora: 12mm<br>Profondità ancora: 4 mm<br>Lunghezza di lavoro: 165cm                                                                                                                                       | 1           | 200.10    |
|                                                                                                                       | <b>OTSC° Anchor 220tt (220 cm)</b>                            | Larghezza ancora: 9mm<br>Profondità ancora: 2-2,5mm<br>Lunghezza di lavoro: 220cm                                                                                                                                     | 1           | 200.11    |
|  <b>FTRD°</b><br><b>GRASPER</b>    | <b>FTRD° Grasper</b>                                          | Larghezza punta: 9 mm<br>Profondità punta: 2 – 2,5mm<br>Lunghezza di lavoro: 220cm                                                                                                                                    | 5           | 200.73    |

guarda il video per assemblare AWC° duo





# HemoPill®

Linea di prodotti diagnostici per la rilevazione immediata e l'esclusione di sanguinamenti acuti nell'esofago, nello stomaco e nell'intestino tenue.

**HemoPill® acute** è una capsula sensore deglutibile che trasmette misurazioni a un ricevitore portatile (HemoPill® Receiver) via radio, permettendo ai professionisti sanitari di valutare al meglio l'approccio endoscopico ottimale basandosi su questi dati.



## Indicazioni

- Rilevamento immediato o esclusione di sanguinamento acuto nell'esofago, nello stomaco e nell'intestino tenue.
- Rilevamento anche di piccole quantità di sangue.
- Può facilitare la scelta nella priorità degli esami endoscopici in urgenza.

## Vantaggi

- Non serve alcuna preparazione del paziente.
- Facile da usare grazie alla capsula facile da deglutire.
- Trasmissione sicura e telemetrica dei dati in tempo reale.
- Non è necessaria un'analisi dispendiosa in termini di tempo.
- Risonanza magnetica sicura in determinate condizioni

## Info Prodotto



### HemoPill® acute

Capsula piccola e deglutibile con sensore ottico.



### HemoPill® Receiver

Ricevitore portatile per visualizzare e memorizzare i valori misurati dell'HemoPill® acute.



### HemoPill® Printer

Stampante con 5 rotoli di carta per stampare i risultati.

## Codici & Misure

|                                                                                   | Prodotto                                    | Descrizione                                                                                                                                             | Pz. / Conf. | Codice |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>HemoPill® acute</b>                      | Piccola capsula deglutibile con sensore ottico;<br>Tempo massimo di misurazione: 9 ore, lunghezza: 26,3 mm; Diametro max: 7,0 mm                        | 5           | 500.01 |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                         |             |        |
|  | <b>HemoPill® Receiver</b>                   | Ricevitore portatile per visualizzare e memorizzare i valori misurati dell'HemoPill® acute                                                              | 1           | 500.20 |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                         |             |        |
|                                                                                   | <b>HemoPill® Printer</b>                    | Stampante per stampare i risultati<br>Contiene:<br>1x Stampante HemoPill® 1x cavo USB<br>1x cavo di alimentazione della stampante<br>5 rotoli di cart   | 1           | 500.30 |
|                                                                                   | <b>HemoPill® Printer paper rolls</b>        | Carta speciale termosensibile per la stampante HemoPill®                                                                                                | 5           | 500.32 |
|                                                                                   | <b>HemoPill® Storage and Transport Case</b> | La valigia può contenere: ricevitore HemoPill®, alimentatore del ricevitore, stampante HemoPill®, alimentatore per stampante, cavo USB, rotoli di carta | 1           | 500.34 |

guarda il video di HemoPill®





# OTSC<sup>®</sup> Proctology

Per la chiusura efficace e delicata delle fistole anorettali.

**OTSC<sup>®</sup> Proctology** è un sistema a clip che preserva lo sfintere per la chiusura efficace delle fistole anorettali.



# OTSC® Proctology

## Indicazioni

- Chiusura dinamica delle fistole anorettali e delle perdite anastomotiche.
- Alta efficacia clinica.

## Vantaggi

- Applicazione transanale semplice della clip tramite uno strumento ergonomico azionato con una mano.
- Nessun allentamento o rottura ritardata delle suture.
- Alta forza di compressione sulla lesione proteggendo il tessuto.
- Facile da usare e risparmiando lo sfintere.

## Info Prodotto



### OTSC® Proctology

Composto dall'applicatore con meccanismo di rilascio, clip premontata e passa-fili situato nel canale di lavoro del manipolo.



### OTSC® Proctology Clip

La geometria del Clip OTSC® corrisponde a quella della versione endoscopica OTSC® t-Clip (t - denti mediamente appuntiti). Il design della clip consente un posizionamento ottimale nel canale anale.



### OTSC® Proctology Anchor

Usata per migliorare l'approssimazione del tessuto, anche in caso di cicatrici o quando le suture a forma di U non sono possibili o desiderate.



### Fistula Brush

Utilizzato per sondare e pulire il canale della fistola. È composto da un filo semi-flessibile con una sezione a spazzola al centro, un occhiello a un'estremità e una sfera sull'altra estremità.

## Codici & Misure

|                                                                                                       | Prodotto                               | Descrizione                                                                                                                  | Pz. /<br>Conf. | Codice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|  OTSC®<br>PROCTOLOGY | <b>OTSC® Proctology</b>                | Sistema per l'applicazione di OTSC® Proctology Clip in proctologia..                                                         | 1              | 200.60 |
|  OTSC®<br>ANCHOR PR  | <b>OTSC® Proctology Anchor (38 cm)</b> | Strumento per una migliore trazione dei tessuti, anche in tessuto ulcerato. Larghezza ancora: 12 mm, profondità ancora: 4 mm | 1              | 200.61 |
|  FISTULA<br>BRUSH PR | <b>Fistula Brush</b>                   | Strumento per sondare e pulire le fistole anorettali                                                                         | 5              | 200.62 |

guarda il video di OTSC® Proctology





Distributore Esclusivo per l'Italia:



**Euromedical S.r.l.**

Via Volta 23/E - 25010  
San Zeno Naviglio (BS)

Tel. +39 030 3530660  
Fax +39 030 3469896  
mail: [info@euromedicalonline.it](mailto:info@euromedicalonline.it)

[www.euromedicalonline.it](http://www.euromedicalonline.it)

**Ovesco Endoscopy AG**

Friedrich-Miescher-Strasse 9  
72076 Tuebingen  
Germany

Phone +49 (0) 7071 96528-160  
E-Mail [service@ovesco.com](mailto:service@ovesco.com)

© 2025 Ovesco Endoscopy AG.

All rights reserved.

The contents of this catalog are  
protected by copyright.

Despite careful preparation, we cannot  
guarantee that the information is  
correct, complete, or up to date.  
Subject to changes and errors.



Find our complete  
product portfolio  
here.



Here you will find all  
information about the  
Ovesco Training Campus

[www.ovesco.com](http://www.ovesco.com)